

Tomografía de Coherencia Óptica


Series 3D OCT-2000



Las series 3D OCT-2000 fueron diseñadas para cubrir las necesidades de los profesionales del cuidado de la visión.


Las series 3D OCT-2000 Spectral Domain fueron diseñadas para cubrir las necesidades de los profesionales del cuidado de la visión- desde la práctica de un doctor en su consulta oftalmológica hasta la práctica en grandes hospitales universitarios, existe un modelo 3DOCT-2000 que se adapta a las necesidades particulares de cada uno de ellos.

3D OCT-2000 FA plus

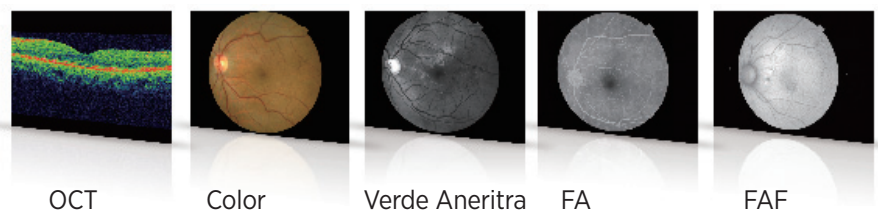


>> Imágenes adquiridas OCT , Color, Verde Aneritra (Digital), FA , FAF

3D OCT-2000 FA

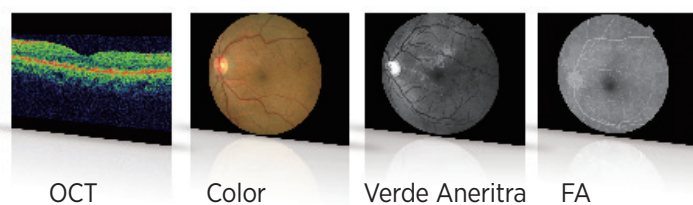


>> Imágenes adquiridas OCT , Color, Verde Aneritra (Digital), FA

3D OCT-2000

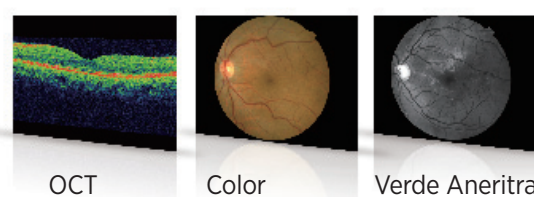


>> Imágenes adquiridas OCT, Color, Verde Aneritra (Digital)

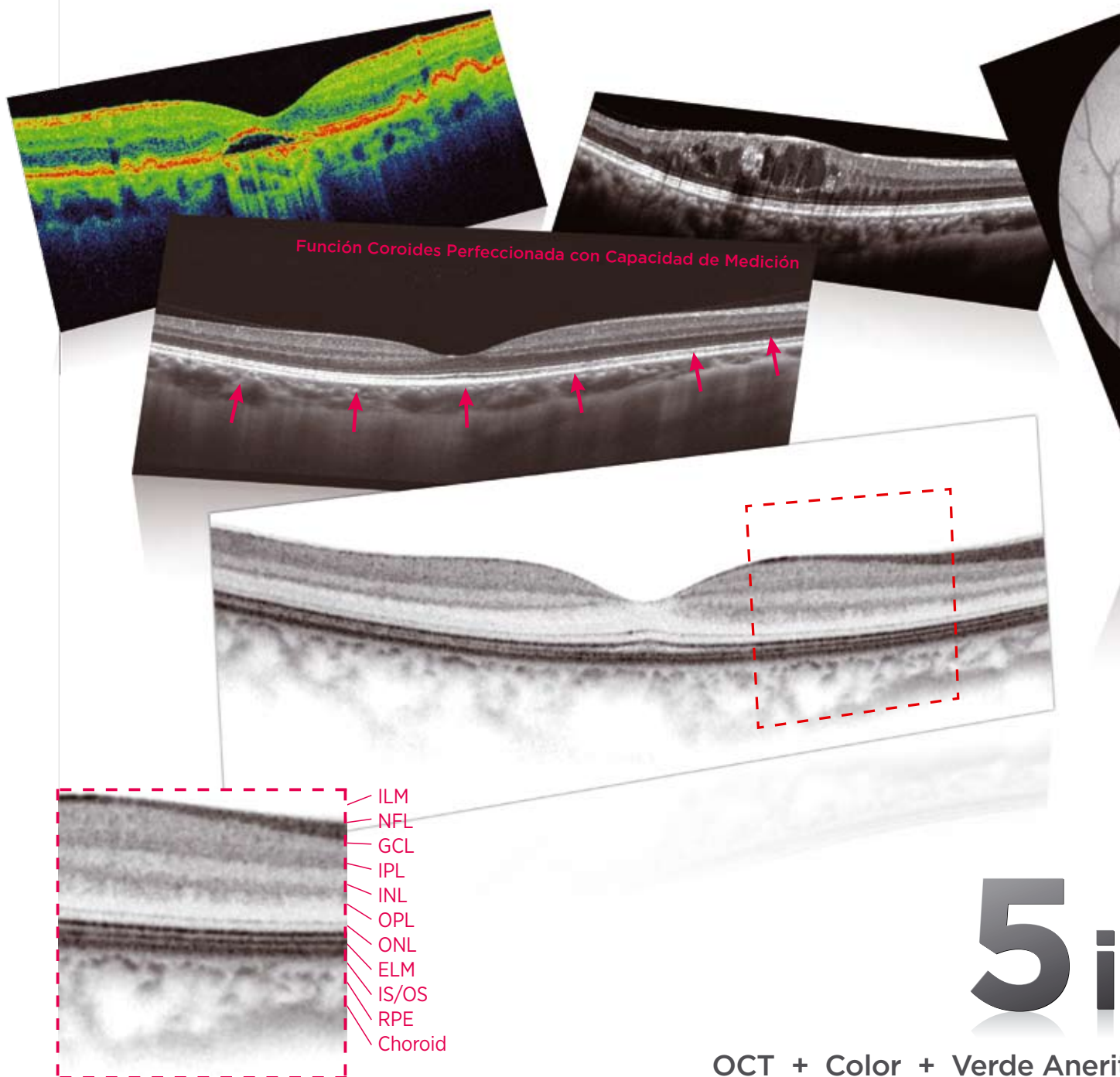

50,000 A-scans/ seg proporciona grandes detalles en un periodo de tiempo más reducido.

El perfeccionamiento de 50,000 A-scans/ seg permite la toma de una tomografía más rápida y por tanto, se minimizan los artefactos generados por movimientos oculares, produciendo una nítida imagen de sección en cruz de la retina. La nueva función de análisis reduce el tiempo de procesamiento a un 50%. La "función de Coroides Perfeccionada" de Topcon, visualiza más estructuras internas, permitiendo una visualización superior del EPR y del área de la coroides.

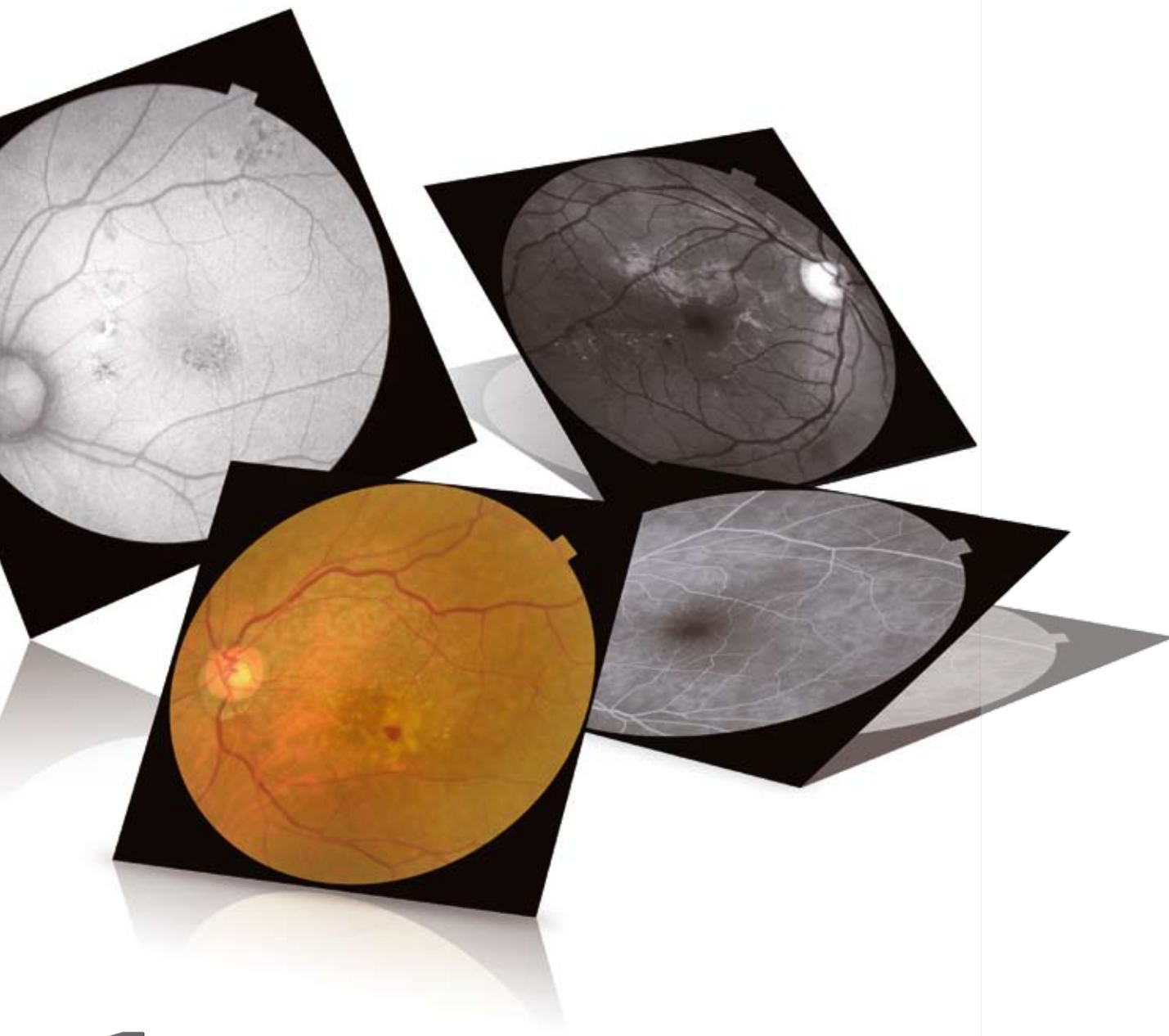

n1

tra (Digital) + FA + FAF

Los retinógrafos de alta resolución producen sensacionales imágenes detalladas


Las imágenes OCT en Color, Verde Aneritra (Digital), FA, FAF se pueden generar a partir de un mismo equipo. Asimismo, se pueden configurar los parámetros de la cámara según preferencias para obtención de imágenes de fondo. En el caso que se requiera la imagen OCT, simplemente seleccionar "Fotografía en Color off".

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE



Pantalla táctil sencilla

La pantalla del monitor es un panel táctil en el que se expone la información y le permite ejecutar una diversidad de operaciones mediante el tacto.

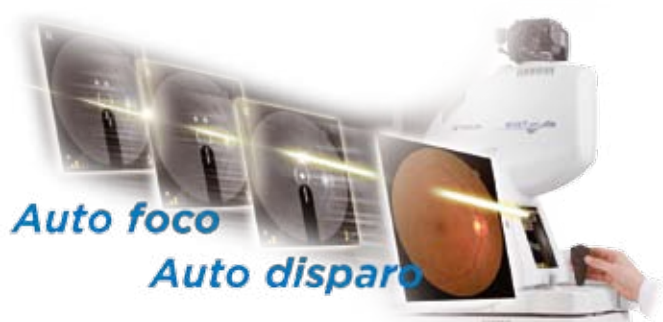


Funciones automáticas



» **Fotografía del Fondo Ocular**
Auto foco/ Auto disparo

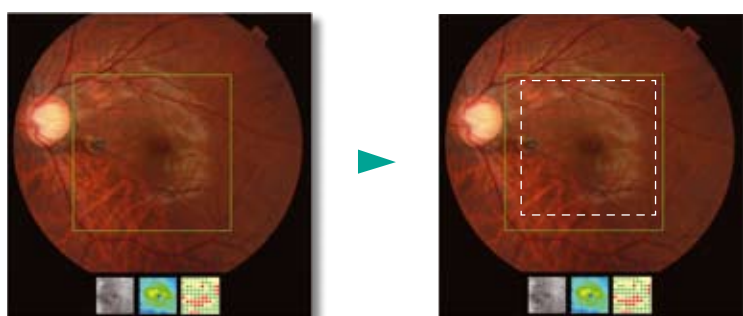

» **Fotografía OCT**
Auto foco/ Auto bloqueo Z&Z/
Auto polarización




Detección del centro automática



Si la fovea está ligeramente fuera de foco después de realizar un escaner de la mácula en 3D (V), 3D OCT-2000 puede automáticamente centrar la fovea para asegurar un informe preciso y una posterior supervisión de la imagen durante el análisis.

-  Durante la captura
-  Después de la captura

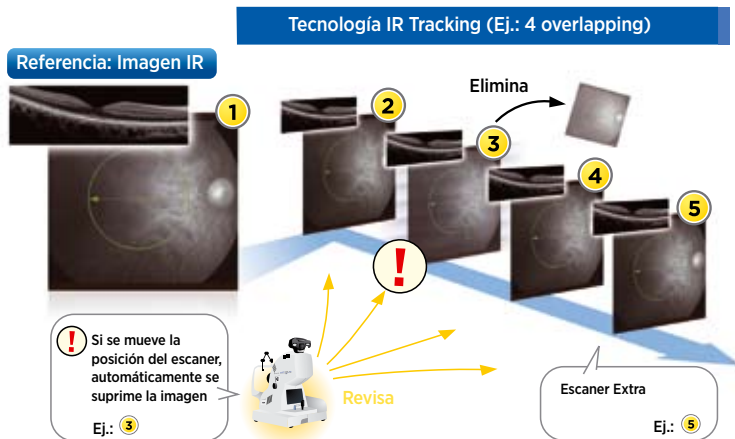

Función IR Tracking

Durante la captura, IR tracking utiliza la imagen IR para coincidir exactamente en el mismo lugar de la retina. Si las áreas de escaneo se mueven, la función de escaner comienza nuevamente de forma automática.



Corrección del Movimiento / Compensación / Función de Reescaneo

Durante la adquisición de la imagen, se produce el movimiento de los ojos en dirección X e Y. Este problema de fijación puede ser el motivo de la aparición de un mayor número de artefactos. Por ello, para minimizar esta influencia, La Función "Motion Correction/ Compensation / Rescanning Functions" se activa mientras se efectúa la captura.

» Corrección del Movimiento


Corrige el movimiento en dirección Z.

» Compensación

Rastreo ocular y escaner de una área 7 x 7mm, compensando el movimiento en dirección X.


» Función de Reescaneo

El movimiento en dirección Y puede en ocasiones obviar áreas de escaneo. En tal caso, se activa la función de reescaner.


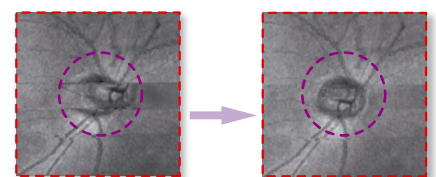


Corrección del Diámetro de Escaner Circular

La Corrección del Diámetro del Escaner Circular ajusta el círculo en relación a la longitud axial del paciente, curvatura corneal, y dioptría refractiva, manteniendo el tamaño del diámetro constante a 3.4 mm en la retina.

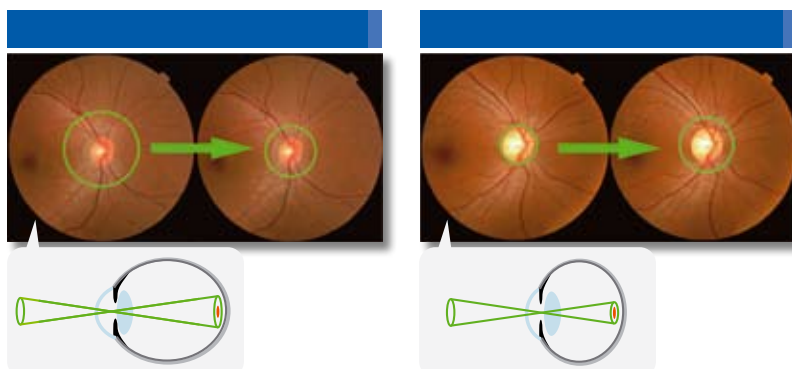

LOS DATOS ANALIZADOS SE PUEDEN OBTENER FÁCILMENTE Y COMPRENDER A PARTIR DE UNA PLANTILLA COMPLETA DEL INFORME

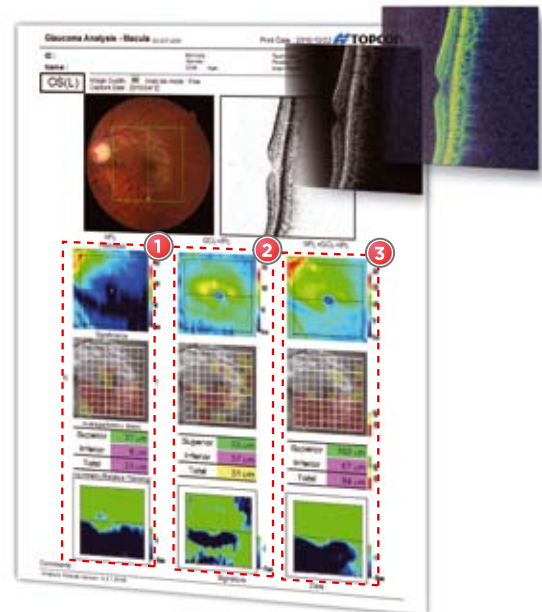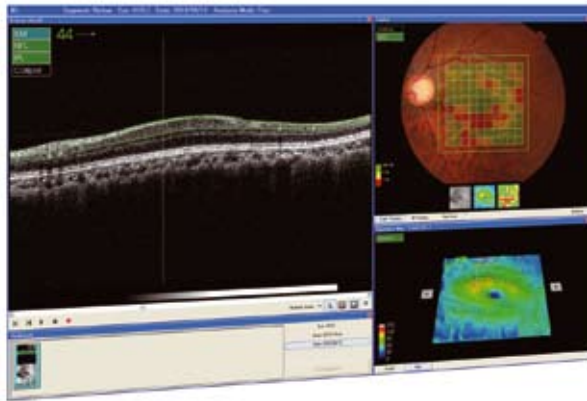

Análisis de Glaucoma (Mácula)

Análisis de Glaucoma (mácula) detecta y analiza



① NFL ② GCL+IPL ③ NFL+GCL+IPL en mácula

Mapa de espesor: Proporciona el espesor del área analizada mediante una escala de colores.

Mapa normativo: El espesor resultante se puede comparar con la base de datos normativa del área rejilla de 10x10 de la imagen Verde aneritra.


Media de espesores: Se puede visualizar la media del Espesor Total/ Superior/ Inferior

Mapa de asimetría: Produce un valor diferencial del espesor superior e inferior.

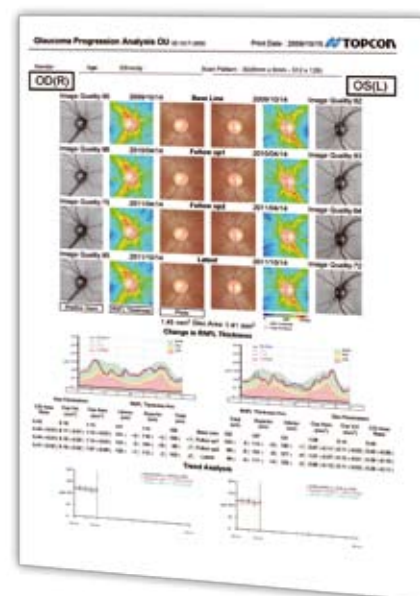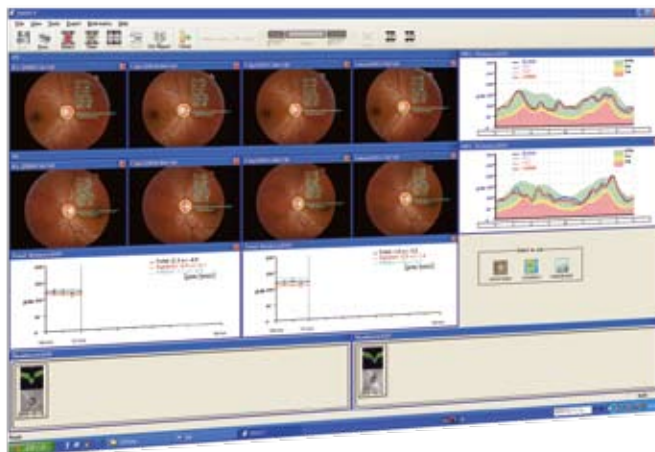



Análisis de tendencia RNFL

Las imágenes en color de fondo ocular/ mapa de espesor NFL/ imágenes OCT/ el ratio de la Copa y Disco se pueden generar y comparar con la base de datos normativa. Se pueden exponer y usar para el Informe de Tendencia RNFL un máximo de 4 imágenes.

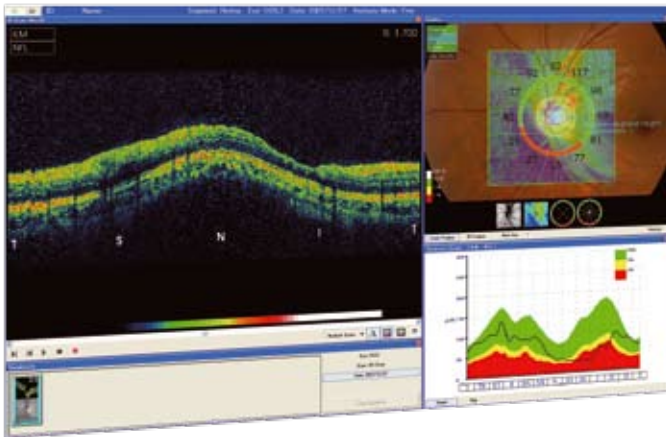

Análisis de disco Óptico

La imagen superior es un ejemplo de informe y análisis de glaucoma estándar. El margen de disco y copa se pueden ajustar automática o manualmente garantizando resultados minuciosos.

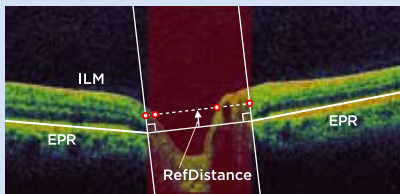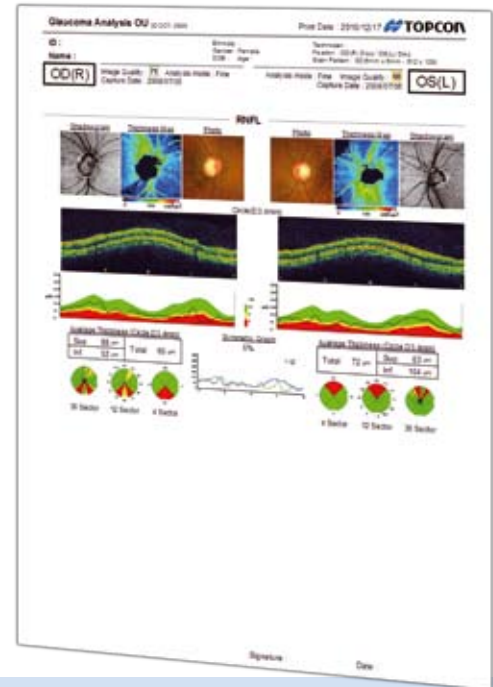


>> Margen del disco

Basado en los bordes de EPR, el software automáticamente determina el margen del disco.


>> Margen de la copa

Utilizando una línea horizontal entre los bordes de EPR como punto de referencia, el software crea una línea de 120µm (plano variable) sobre la línea entre los bordes de EPR. El margen de la copa se determinará en los puntos s de la cruz del plano de referencia y el ILM.

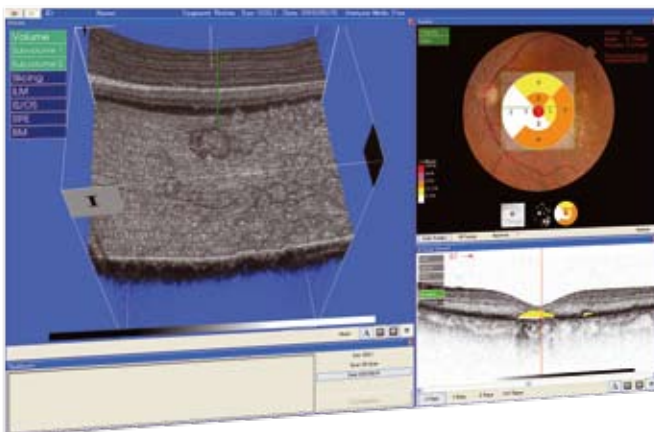


Análisis de drusas

Se puede visualizar el recuento de drusas/ área/ volumen. El cómputo de drusas se describe en referencia al color de la imagen de fondo ocular en el informe. El código de color va en concordancia con el área de drusas en cada rejilla ETDRS. Este análisis de drusas favorece el análisis visual y puede ayudar al control de la DMAE.

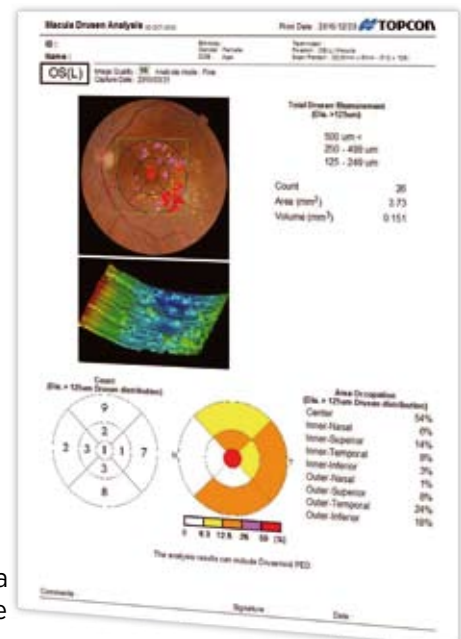

Topcon 3D OCT-2000 y su software de visualización juegan un papel clave en la gestión de datos del paciente. Es el único software que permite la recopilación, almacenamiento y la revisión remota a través de una red de trabajo unificada IMAGENet, de todos los datos e imágenes del paciente. Las imágenes OCT se pueden ver y analizar mediante la red de trabajo desde cualquier lugar; meetings de medicina, simulación quirúrgica en el quirófano y en la sala de consulta. Además, un sistema IMAGENet permite reunir en un único informe del paciente, todas las imágenes clínicas obtenidas a partir del departamento de oftalmología, facilitando consecuentemente un diagnóstico completo.

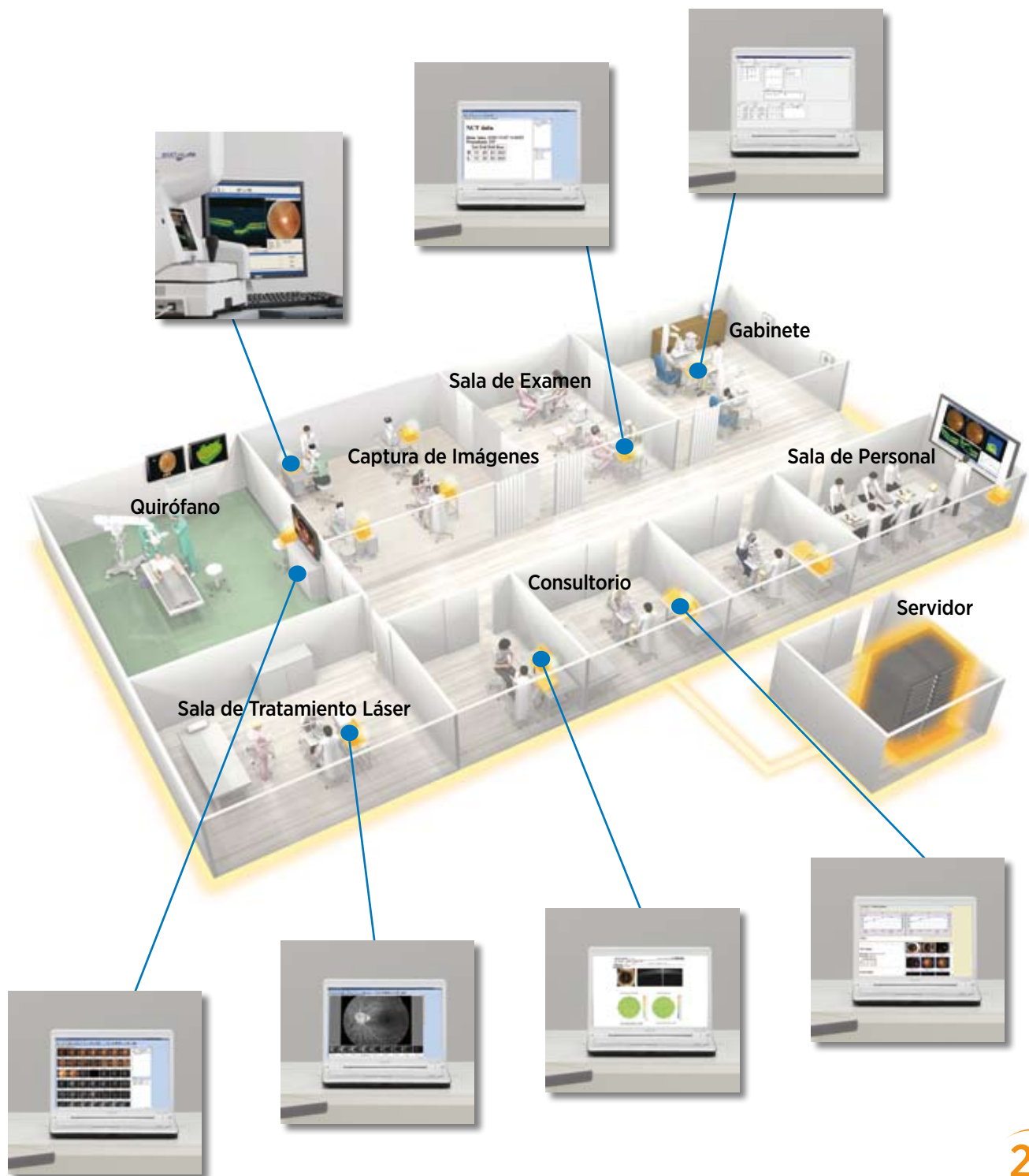

FOTOGRAFÍA FA/ FAF: MODERNA TECNOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES TOPCON



3D OCT-2000FA plus puede realizar imágenes OCT, en Color, Verde aneritra (Digital), y FAF. Topcon 3D OCT-2000 contribuye a un diagnóstico efectivo.




Captura Sencilla: FA/ FAF

4 Pasos fáciles

La fotografía FA/ FAF está actualmente disponible gracias a 3D OCT-2000 Topcon.

1

Registro/ Selección del paciente

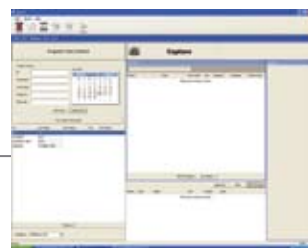

2

Elección del patrón de escaner

* Ej.: Fotografía FA




3

Captura




4

La imagen se exportará automáticamente en el PC

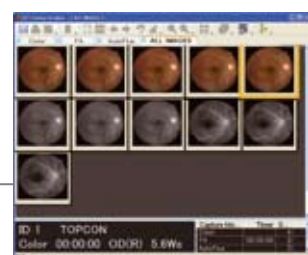

Imágenes clínicas

>> Caso 1: Hombre, DMAE (Degeneración Macular Senil)

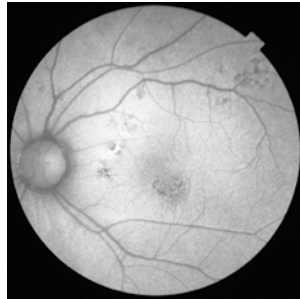

>> Caso 2: Hombre de 75 años de edad, DMAE (Degeneración Macular Senil)




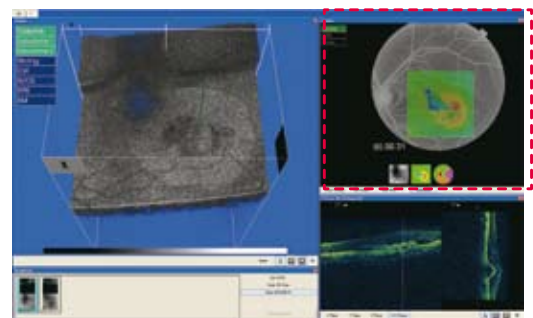




Imagen FA importada

>> Caso 3: Hombre de 82 años de edad, BRVO (Oclusión de una rama de la vena retiniana)

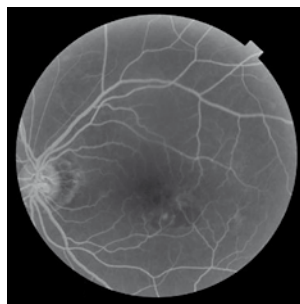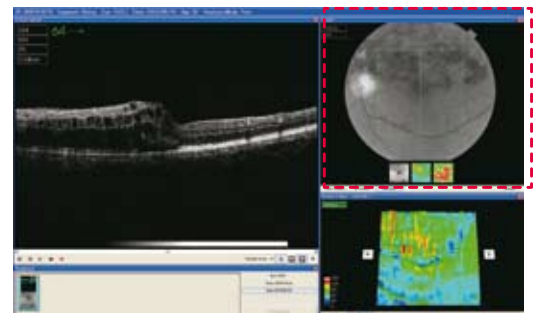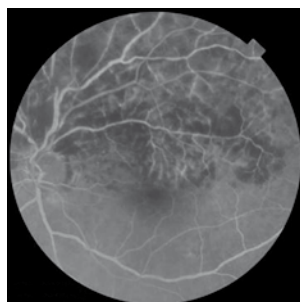

Verde Aneritra (digital)

>> Caso 4: Mujer de 57 años de edad, RD (Retinopatía diabética)

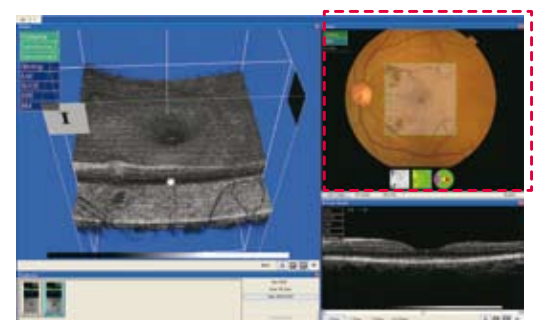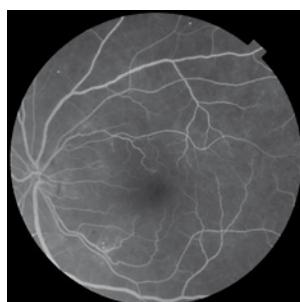

Color

Especificaciones

Observación y Fotografía del Fondo Ocular		
Tipo de escaner		Color, FA ^{*1} , FAF ^{*1} (Filtros Spaide), Verde Aneritra ^{*2}
Observación		Próximo a IR
Ángulo de Fotografía		45° Equivalente a 30° (zoom digital)
Intervalo de Escala Dióptrica^{*3}		-13 D a +12 D (en fotografía de fondo ocular)
Distancia de Operación		40.7 mm (en fotografía de fondo ocular) 63.7 mm (en fotografía de segmento anterior) ^{*4}
Diámetro Pupilar Fotografiable		45°: ϕ 4.0 mm o más Diámetro Pupilar Estrecho: ϕ 3.3 mm o más
Observación y Fotografía de Fondo Ocular/ Tomografía de Segmento Anterior		
Rango de Escaner	(en Fondo Ocular) (En córnea)	[Lateral] dentro de 3-9mm [Vertical] dentro de 3-9mm [Lateral] dentro de 3-9mm [Vertical] dentro de 3-6mm
Modelo de Escaner^{*5}	Mácula: Escaner 3D	512x128 (128 líneas de escaner horizontal, con 512 A-scans), 6 x 6 mm
	Mácula: Escaner Radial	1024x6 o 12 (6 o 12 líneas de escaner radial con 1024 A-scans), 6 mm
(Recomendado)	Mácula: 7 Raster Lineal	1024x7 (1024 A-scan con B-scan x7), 6 mm
	Disco: Escaner 3D	512x128 (128 líneas de escaner horizontal con), 6 x 6 mm
	Disco: Escaner Circular	1024 A-scans, ϕ 3.4 mm
	Anterior: Escaner Radial (Para córnea)	1024x12 (12 líneas de escaner radial con 1024 A-scans), 6 mm
	Anterior: Escaner Lineal (para ángulo de cámara)	1024 (línea de escaner lineal con 1024 A-scans), 3mm
Velocidad de Escaner		50,000 A-scans por segundo / 27,000 A-scans por segundo
Profundidad de Escaner		2.3 mm
Resolución axial		5 μ m - 6 μ m
Diámetro Pupilar Fotografiable		ϕ 2.5 mm o más
Observación y Fotografía de Fondo Ocular/ Tomografía de Fondo Ocular		
Identificación de Capas Retinianas		Macula: ILM, IS/OS, RPE, BM Glaucoma: ILM, NFL, IPL
Foco de Referencia OCT		Vitreo y Coroides
Fijación		LCD Matriz Interna y dispositivo de Fijación externa ajustable (Matriz LCD: La posición de visualización se puede cambiar y ajustar. El modo de presentación es modificable.)
Fuente de Luz/ Fuente de Alimentación/ Abastecimiento		
Fuente de Luz		Diodo de Super Luminiscencia (SLD) Longitud de Onda 840nm Ancho de banda medio: 50nm Salida en córnea - 0.65 mW
Fuente de Alimentación		Voltaje: 100/110/120/220/230/240V Frecuencia: 50-60Hz
Abastecimiento		200VA (Max 400VA)
Dimensiones/ Peso		
Dimensiones		545 mm(W) x 535 mm(D) x 600 - 630 mm(H)
Peso		35 kg (3D OCT-2000) 37 kg (3D OCT-2000 FA Plus)

^{*1} Sólo para el modelo FA plus

^{*2} Visualización digital Verde Aneritra

^{*3} Sin compensador dióptrico

^{*4} Con accesorio de segmento anterior

^{*5} Más modelos de escaner variables con una combinación de píxeles distintos y rango de escaner

IMPORTANTE

Sujeto a cambios en el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

Para obtener máximo rendimiento de este instrumento, por favor, lea detenidamente el manual de instrucciones antes de su utilización.



Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145;
2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands
Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045
E-mail: medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

Topcon Danmark
Praestemarksvej 25; 4000 Roskilde, Danmark
Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555
E-mail: info@topcondanmark.dk
www.topcondanmark.dk

Topcon Scandinavia A.B.
Neogatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal, Sweden
Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249
E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

Topcon España S.A.
HEAD OFFICE; Frederic Mompou, 4;
08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain
Phone: +34-93-4734057; Fax: +34-93-4733932
E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

Topcon Italy
Viale dell' Industria 60;
20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy
Phone: +39-02-9186671; Fax: +39-02-91081091
E-mail: topconitaly@tiscali.it; www.topcon.it

Topcon S.A.R.L.
HEAD OFFICE; 89, rue de Paris; 92585 Clichy, France
Phone: +33-(0)1-41069494; Fax: +33-(0)1-47390251
E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon.fr

Topcon Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41;
D-47877 Willich, Germany
Phone: (+49) 2154-885-0; Fax: (+49) 2154-885-177
E-mail: med@topcon.de; www.topcon.de

Topcon Portugal
Rua da Forte, 6-6A, L-0-22; 2790-072
Carnaxide; Portugal
Phone: +351-210-994626; Fax: +351-210-938786
www.topcon.pt

Topcon Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland
Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax: +48-(0)32-671-34-05
www.topcon-polska.pl

Topcon (Great Britain) Ltd.
Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury
Berkshire RG14 5PX; United Kingdom
Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170
E-mail: medical@topcon.co.uk; www.topcon.co.uk

Topcon Ireland
Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2
Ballycoolin; Dublin 15, Ireland
Phone: +353-18975900; Fax: +353-18293915
E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie



TOPCON CORPORATION

75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, Japan. Phone: 3-3558-2523/2522 Fax: 3-3960-4214 www.topcon.co.jp